

Laat de patiënt de arm strekken, leg de stuwband om (handbreedte boven de elleboog) en trek deze strak aan. Hou een vinger tussen de sluiting en de arm.



Laat de patiënt een vuist maken en zoek door middel van kijken en voelen een geschikte punctieplaats uit.




Ontsmet de punctieplaats met een desinfectiemiddel (70% alcohol) en wacht tot de vloeistof verdampt is.



Verwijder het dopje van de naald, fixeër het vat indien nodig en prik deze in een beweging aan met de naaldopening naar boven.




Druk vervolgens een vacuümbuis in de huls en maak de stuwband los zodra er bloed in de buis stroomt. Stuw maximaal 1 minuut.

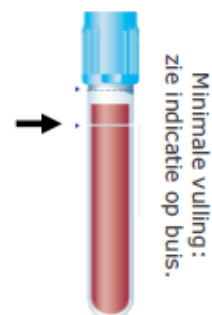

Verwijder de buis als deze geheel gevuld is en vul de overige buizen. Neem de buizen af volgens voorgeschreven volgorde.

= 1x gemengd

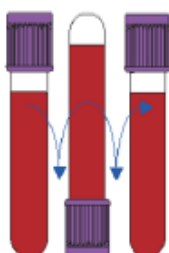

Zwenk de buis (blauw, geel en rood 6x, overige 8x) direct na afname.



Verwijder de naald nadat alle buizen gevuld zijn en druk met een watje de punctieplaats af. Voer de naald op een veilige manier af.



Verwijder de stuwband af en controleer of de punctieplaats nog bloedt. Plak een pleister over de wat als het bloeden gestopt is.

Instructiekaart bloedafname

Aandachtspunten









Vorbereiding

- Identificeer de patiënt door minimaal naam en geboortedatum te controleren
- Zorg ervoor dat de volledige patiëntgegevens op de aanvraag vermeld zijn (achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, BSN) en voorzie de aanvraag van een afname etiket (monsternummer)
- Noteer de datum en tijdstip van afname op het formulier en de naam van degene die de bloedafname heeft verricht.
- Controleer de houdbaarheid van de buizen en identificeer deze door ze te voorzien van een afname etiket (monsternummer). Plak het etiket zo hoog mogelijk en met de pijl richting de dop over etiket wat op de buis zit. Indien niet voorhanden noteer dan naam en geboortedatum op de buizen.

Etiket vlak onder de dop plakken.



- Welk type buis er voor een onderzoek nodig is, is te vinden op het aanvraagformulier of op het bloed-buiskleurenformulier. Dit formulier is te vinden op onze website. www.resultlaboratorium.nl
- Zet de buizen in de volgorde van afname klaar. Mocht er een bloedkweek afgenomen worden neem dan eerst de groene bloedkweekbuis en daarna de oranje bloedkweekbuis af.

Type	Dop	Mengen
1 Bloedkweek	Aëroob Anaëroob	10x
2 Citraat		6x
3 Serum / Serum gel	 	6x
4 Heparine / Heparine gel	 	8 - 10x
5 EDTA	 	8 - 10x
6 Fluoride		8 - 10x

VOLGORDE VAN AFNAME

Bloedafname

- Patiënten materiaal is potentieel besmet materiaal en dient als zodanig behandeld te worden.
- Neem geen bloed af uit een arm waar in een lopend infuus zit.
- Bij het gebruiken van een vlindernaald, altijd een tweede citraatbuis afnemen i.v.m. het juist vullen van de buis (eerste buis bevat extra lucht).
- Gebruikte naalden mogen niet worden terug gestoken in de huls, gebruik het safetylok systeem en voer ze af in een container die geschikt is voor scherp en besmet afval
- Zorg dat het bloed binnen de vastgestelde houdbaarheidstermijn voor de aangevraagde testen op het laboratorium komt

Kijk voor de volledige instructie het voorschrift van Result Laboratorium "Bloedafname veneus"